




Yes, you can.®


## Invacare® **Materassi**

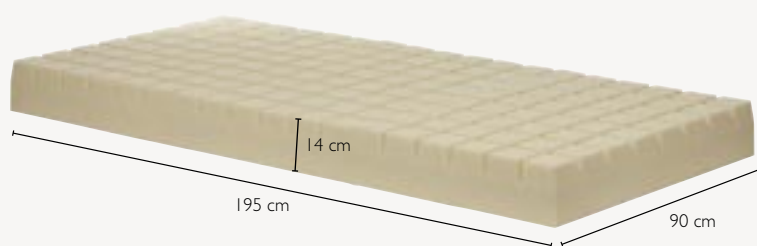

### > **Invacare® Materasso Ventilato**

Il materasso ventilato in espanso monodensità riduce il rischio da decubito a quei pazienti che devono stare a letto per un lungo periodo. La particolare forma del materasso con sezioni a "torre" facilita la circolazione dell'aria evitando così la sudorazione del corpo e il conseguente rischio di lesioni durante i movimenti del paziente.

- Autoestinguento
- Sezioni monodensità
- 3 sezioni identiche indipendenti

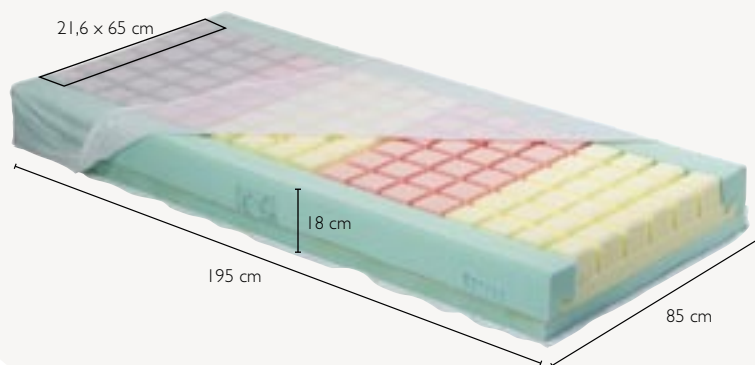



### > **Invacare® Respos L883**

Materasso ventilato in espanso a densità differenziata. La combinazione di 9 zone di diversa densità, mousse più morbida nelle parti a rischio elevato e mousse più densa nelle zone a rischio ridotto, garantisce lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle differenti regioni corporee.

- 9 zone a diversa densità evidenziate da differenti colori
- Fasce legate con Velcro posizionabili a seconda delle esigenze
- Consegnato con un telo di protezione

### > **Invacare® Traversa L881**

Traversa estremamente elastica, impermeabile, in Dermalon per proteggere i materassi in espanso.

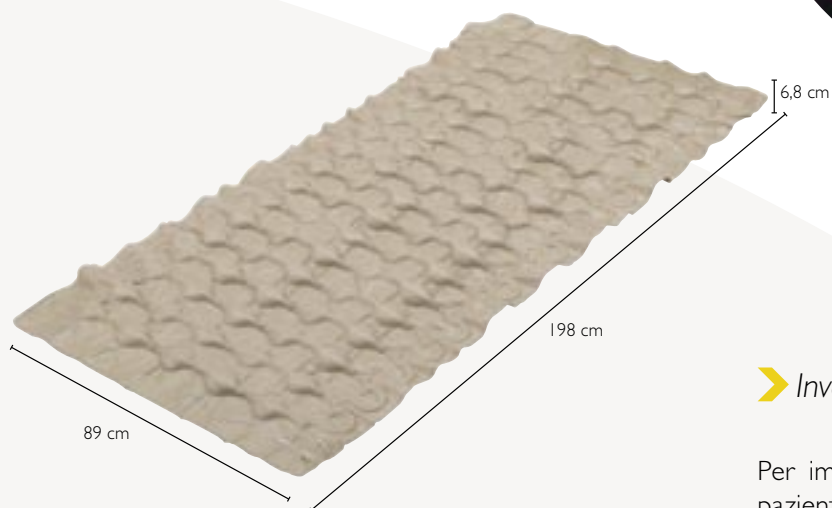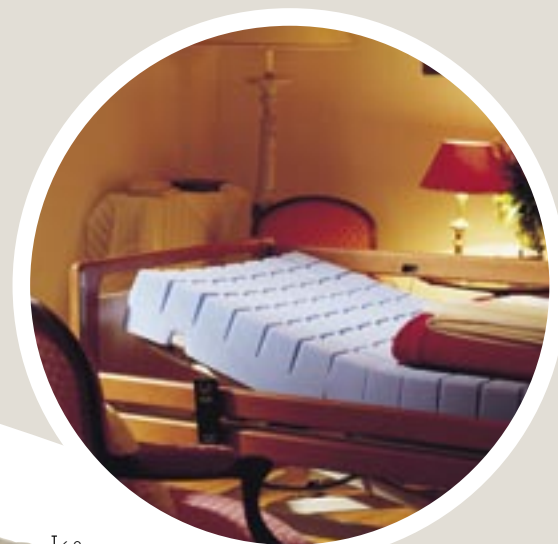

➤ **Invacare® Liber (L803)**  
**Eskal (L839)**

Per impedire che la stessa parte del corpo del paziente sia sottoposta per lungo tempo a delle forti pressioni, è nato il sovrasmaterasso **Eskal** costituito da 2 serie di celle d'aria a forma sferica, disposte alternativamente in file parallele e interconnesse che si gonfiano e sgonfiano ciclicamente. E' dotato di un compressore Liber, silenziosissimo, con il regolatore di flusso d'aria.

- Movimenti del materasso favoriscono la circolazione dell'aria
- Compressore molto silenzioso
- Pressione dell'aria regolabile
- Peso paziente: 50 - 100 kg
- Compressore con 2 ganci fissaggio al letto

### Caratteristiche tecniche

	Materasso Ventilato	Respos	Traversa	Liber-Eskal
Peso (kg)	6,5	10	0,4	2,5 / 2
Peso max. utilizzatore (kg)	100	100		100
Codici ISO	03.33.06.003	03.33.06.006	03.33.06.027	03.33.06.018

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE  
**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**